


**АСПИРАЦИОННЫЕ
И ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ**

Plasti-med
"supporting healthy life"

АСПИРАЦИОННЫЕ НАБОРЫ

Вакуумные мешки

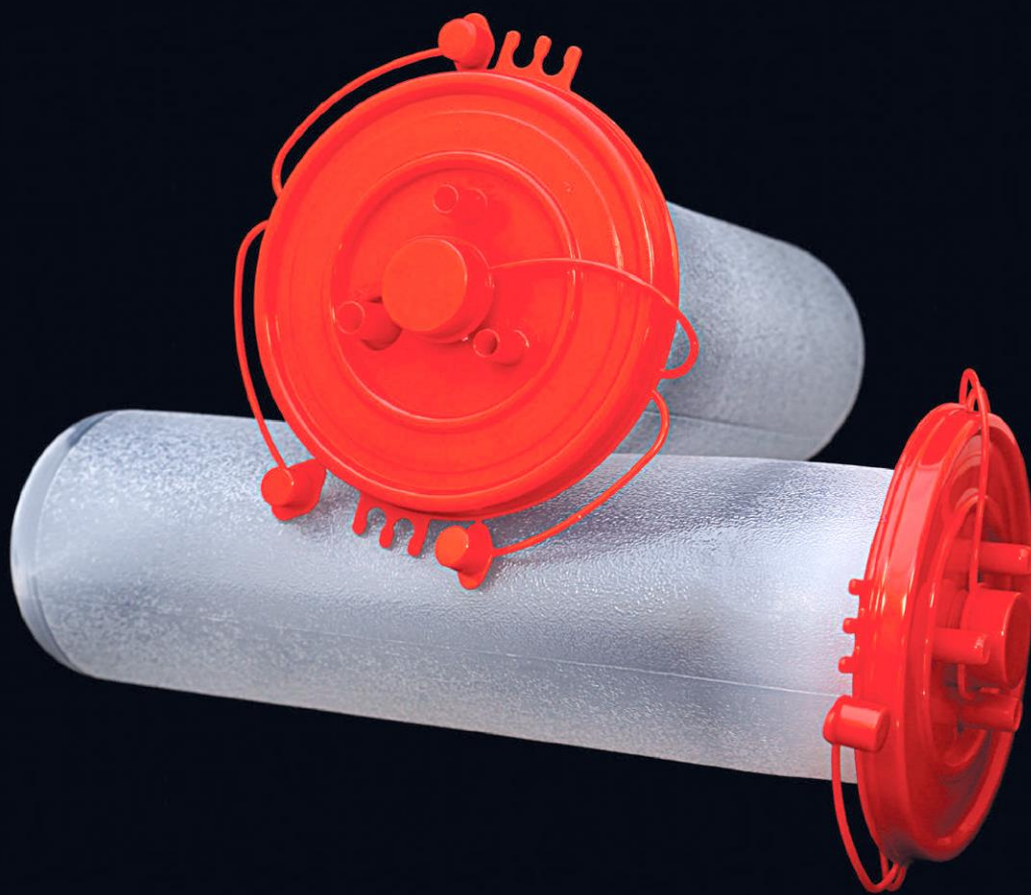

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОГО МЕШКА

- Отсутствует контакт с пациентом.
- В качестве сырья для мешка и крышки используется прочный пластик.
- Можно заказать мешки разного объема: 1200, 1500, 2000, 3000 мл.
- Мешки гибкие и имеют плоское основание.
- Вакуумная часть порта пациента снабжена антирефлюксным клапаном, предотвращающим обратный поток.
- Также в ней имеется фильтр, препятствующий передаче бактерий и вирусов и останавливающий аспирацию при заполнении вакуумного мешка.
- Система крышек позволяет закрыть все порты по окончании процесса аспирации.
- Вакуумный мешок снабжен вакуумной трубкой, длиной 1,8 м, для осуществления аспирации из тела пациента.
- Также имеются два обычных коннектора и один коннектор Каркон для обеспечения соединения пациента с мешком.
- Вакуумный мешок имеет большой порт для образцов, который может пропускать твердые частицы, такие как образцы костей и тканей, получаемые при артроскопии, эндоскопии и прочих аналогичных процедурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ С ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ

- Вакуумный мешок защищает от возможных инфекций, вызываемых больничной средой.
- Прост и удобен в применении медицинским персоналом.
- Прост в соединении и сборке.
- При заполнении легко может быть заменен.
- Устраняет риск разбрызгивания и проливания.
- Помогает поддерживать больничную гигиену.
- Упрощает утилизацию контролируемых медицинских отходов.
- Благодаря закрытой системе запах не распространяется по помещению.
- Во время операции может использовать как анестезиологической, так и операционной бригадами.
- В целом, может использоваться для схожих процедур аспирации жидкости, применяющих источник вакуума.

КОД

ОПИСАНИЕ

160 202 ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 1500 мл

160 203 ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 2000 мл


160 201 ВАКУУМНЫЙ МЕШОК 3000 мл

АСПИРАЦИОННЫЕ НАБОРЫ

Контейнеры



Прикроватный блок пациента

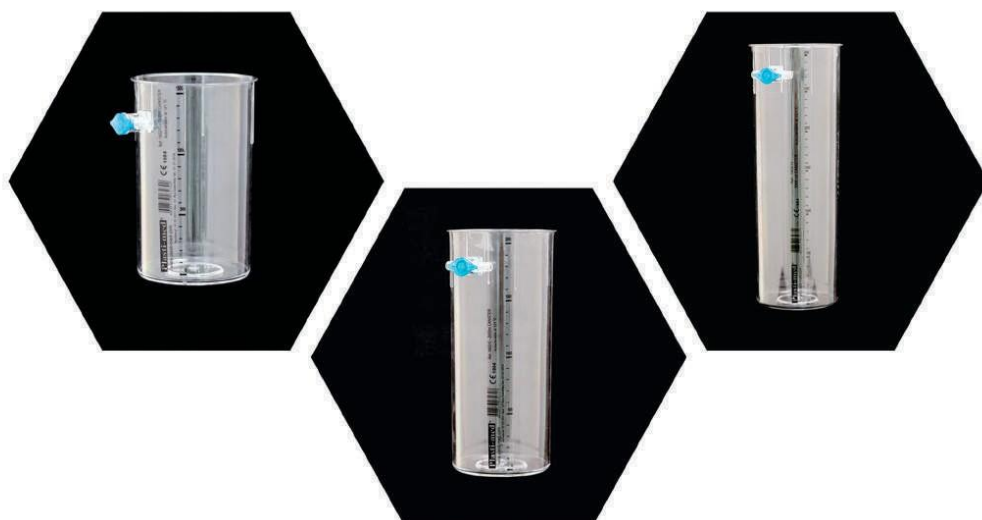

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА

- Имеется три типа контейнеров, объемом 1500 мл, 2000 мл и 3000 мл.
- Контейнер выполнен из ударопрочного поликарбоната.
- Способен выдерживать автоклавную обработку до 121 °С.
- На контейнере имеется двухпозиционный вакуумный клапан для быстрого соединения с вакуумным мешком.
- Легко может быть адаптирован для подключения к системе центрального вакуума или переносному вакуумному устройству.
- Может крепиться на стене или стойке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


СОЕДИНЕНИЯ

- Может соединяться с системой мобильной стойки, а также соединяться с 1х2 и 2х2 контейнерами в операционной.
- Соединение выполнено таким образом, что одновременно может использоваться не менее 2 контейнеров на мобильной стойке.
- В двойной системе 1 контейнер может использоваться операционной бригадой, а другой контейнер — анестезиологической бригадой.
- Во время параллельного соединения 4 контейнеров все контейнеры являются активными.
- Контейнеры могут быть соединены последовательно.
- В реанимационных палатах и во время реанимационных процедур система может крепиться к стене или на другую систему.
- Во время использования систем мобильных стоек соединение между центральной вакуумной системой и контейнером осуществляется посредством трубок длиной 2,5–4 м. В особых случаях решение предоставляется по запросу.
- В случае настенного монтажа используются трубки длиной 1–1,8 м.

КОД	ОПИСАНИЕ
160 211	ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 1500 мл
160 212	ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 2000 мл
160 213	ВАКУУМНЫЙ КОНТЕЙНЕР 3000 мл

- Подходящий вакуумный мешок помещают в контейнер. Вакуумная трубка вставляется в запорный двухпозиционный клапан на контейнере. Другая часть вакуумной трубки вставляется в вакуумный порт на крышке.
- Тандемный порт и выходное отверстие порта пациента на вакуумном мешке соединяются друг с другом с помощью трубки для тандемного соединения.
- Трубка пациента длиной 1,8 и(или) 3,7 м вставляется в выходное отверстие порта пациента на вакуумном мешке.
- Трубки, выходящие из вакуумного распределителя, другим концом вставляются в запорный двухпозиционный клапан на контейнере.
- Центральная трубка вставляется во внешнюю соединительную часть вакуумного распределителя, и система готова к использованию.

Схема последовательного (тандемного) соединения (2 контейнера)

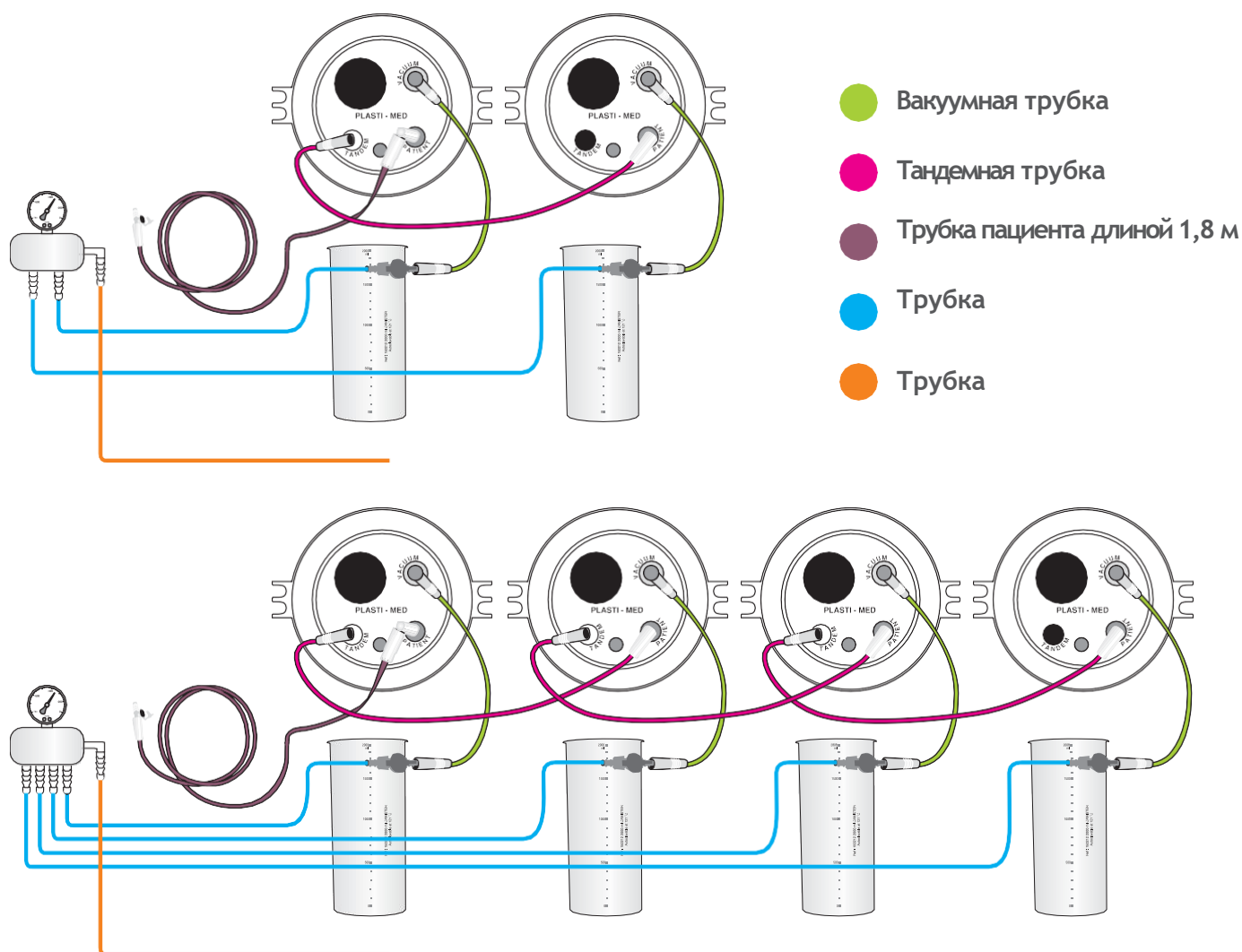



КОД	ОПИСАНИЕ
160 233	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 1500 мл
160 234	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 1500 мл
160 235	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 2000 мл
160 236	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 2000 мл
160 231	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ДВУМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 3000 мл
160 232	СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАКУУМНЫМ МЕШКОМ, 3000 мл