


КАТЕТЕРЫ ДЛЯ АСПИРАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЗАБОРА ПРОБ

Изделие медицинское для санации и забора проб и биологических жидкостей Муко-Сейф

Данные стерильные устройства предназначены для удаления секрета из верхних дыхательных путей новорожденных с целью обеспечения свободного дыхания и/или получения материала для микробиологического исследования.

Муко-Сейф рекомендован для оральной аспирации благодаря наличию гидрофобного фильтра. Фильтр предотвращает возможность перекрестного инфицирования персонала, в том числе ВИЧ-инфекцией.

Выпускается в индивидуальной упаковке, имеет дополнительную крышку и наклейку для записи данных ребенка.

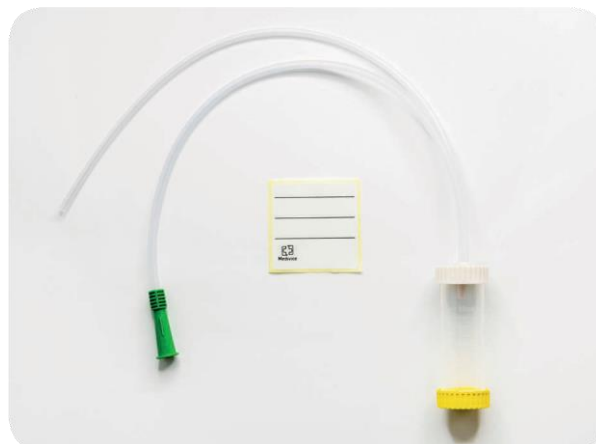

Каталожный номер	Наименование	Размер, СН	Длина, мм	Внешний диаметр, мм
17029185	Изделие медицинское для санации и забора проб биологической жидкости Муко-Сейф с фильтром	10	365	3,3
17030185	Изделие медицинское для санации и забора проб биологической жидкости Муко-Сейф с фильтром	12	365	4,0

Спецификация	
Компоненты	Материал
Трубка катетера	Поливинилхлорид
Воронка, разъем	Гибкий ПВХ-компаунд для литья под давлением
Контейнер	Полипропилен
Крышка двухходовая	Поливинилхлорид
Крышка	Полиэтилен
Гидрофобный фильтр	Политетрафторэтилен

Дополнительная информация:

- Стерильно, предназначен для однократного применения.
- Имеет индивидуальную стерильную упаковку.
- Срок сохранения стерильности изделий 5 лет с даты производства.
- Стерилизован оксидом этилена.

Изделие медицинское для санации и забора проб и биологических жидкостей Трахеа-Сет

Medivice предлагает стерильные одноразовые устройства для забора проб трахеобронхиальных аспиратов с целью бактериологического или цитологического исследования у пациентов, которым проводится искусственная вентиляция легких. Это позволяет на ранних стадиях выявить вентилятор-ассоциированную пневмонию, правильно подобрать и своевременно изменить терапию. Забор исследуемого материала должен проводиться в стерильных условиях во избежание соприкосновения материала с внешней средой.

Трахеа-Сет представляет собой замкнутый контейнер емкостью 10 мл, в крышке которого имеются два выхода (один для присоединения аспирационного катетера, второй - для соединения с источником вакуума).

Важные конструктивные особенности:

- Стандартная лабораторная пробирка исключает необходимость использования дополнительных приспособлений.
- Прозрачный контейнер дает возможность визуально оценить характер содержимого и объем полученного материала. Коннектор обеспечивает соединение с любыми аспирационными катетерами и бронхоскопами. Это позволяет произвести забор трахеобронхиальных аспиратов из эндотрахеальных трубок любого размера, вплоть до минимального, который используется для проведения ИВЛ у самых маленьких новорожденных.
- Удобная самоклеящаяся этикетка для записи данных пациента легко фиксируется к контейнеру с пробой.
- Дополнительная крышка позволяет герметично закрыть контейнер с пробой.
- Удлиненная входная часть позволяет сохранить пробу в контейнере.
- Надежная фиксация входной и выходной трубок к крышке контейнера предотвращает потерю вакуума и утечку отделяемого из контейнера.



Каталожный номер	Описание	Назначение продукции
24001185	Крышка двухходовая зеленая: Вход - воронкообразный коннектор / выход - коннектор "елочка", этикетка пациента, крышка.	для катетеров типа Вакутип или закрытых аспирационных систем
24006185	Крышка двухходовая зеленая: Вход - коннектор "елочка" / выход - воронкообразный коннектор, этикетка пациента, крышка.	для катетеров с воронкообразным коннектором
24005185	Крышка двухходовая зеленая: Вход - коннектор "Фингертуп" с контролем вакуума / выход - воронкообразный коннектор; этикетка пациента x2, крышка x2, дополнительный контейнер	для катетеров с воронкообразным коннектором

Спецификация	
Компоненты	Материал
Трубка катетера	Поливинилхлорид
Воронка, разъем	ПВХ
Контейнер	Полистирол
Крышка двухходовая	Поливинилхлорид
Крышка	Полиэтилен

Дополнительная информация:

- Стерильный, предназначен для однократного применения.
- Имеет индивидуальную стерильную упаковку.
- Срок сохранения стерильности изделий 5 лет с даты изготовления.
- Стерилизован оксидом этилена.