



Unomedical

FOR PEOPLE WHO CARE




Disarp

Одноразовый впитывающий ретрактор

Disarp

превосходный обзор операционного поля

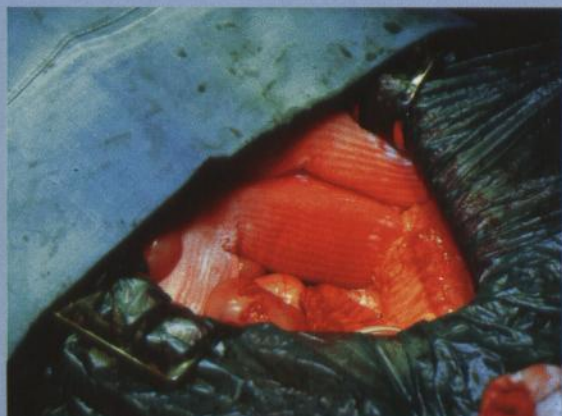

- Одноразовый впитывающий ретрактор Disarp разработан для защиты, отведения и удержания тканей и внутренних органов, с целью обеспечения хорошего обзора области операции, а также поглощения содержимого операционной раны.
- Гибкая металлическая пластина, входящая в состав ретрактора Disarp, придает необходимую жесткость устройству и служит для формирования операционного поля. Более того, данная пластина является рентгенонегативной и служит маркером при рентгенографии.
- Исключительная способность к абсорбции крови и биологических жидкостей в операционной ране.
- Перед установкой Disarp в операционную рану, рекомендуется смочить его в физиологическом растворе для предотвращения прилипания органов и тканей к устройству и поддержании их во влажном состоянии.



Описание товара	Артикул	Кол-во в кор.
Disarp малый 250x50x50 мм	3404318	25
Disarp большой 450x50x50 мм	3404418	25

Используемые материалы

Внешняя часть:	полиамид
Внутренняя часть:	полиуретановая пена
Металлическая пластина:	нержавеющая сталь
Поглощающая способность большого Disarp:	200 куб. см
малого Disarp:	100 куб. см
Упаковка:	двойная стерильная
Стерилизация:	Оксид этилена

ЗАО «Уномедикал»

101000, Россия, Москва
Б. Златоустинский пер., 1, стр.1
Тел. + 7 495 748 78 84
Факс + 7 495 748 78 94
www.unomedical.ru

Unomedical a/s

Birkerød Kongevej 2
DK-3460 Birkerød
Denmark
Phone +45 48 16 70 00
Telefax +45 48 10 30 00
www.unomedical.com