



Unomedical

FOR PEOPLE WHO CARE



OP-Flex™ — полный спектр эргономичных одноразовых рукояток и наборов для интраоперационной аспирации

OP-Flex™ — эргономичная конструкция и совершенство функций

Простая в принципе, но очень важная процедура — аспирация содержимого из операционной раны — была далеко не всегда так удобна и легка, как теперь. Благодаря широкому спектру наборов для интраоперационной аспирации OP-Flex, выпускаемых компанией Уномедикал, хирурги могут работать с комфортом, проводя аспирацию практически из любого доступа. Рукоятки отличаются эргономичным дизайном, снабжены встроенным удобным вакуум-контролем, легки и хорошо сбалансированы, что снижает напряжение запястья и усталость руки.

Дизайн, обеспечивающий непрерывность процедуры

Благодаря специально разработанным коннекторам, изделия OP-Flex не перегибаются даже при использовании в самых необычных положениях. Более того, во время операции рукоятки можно легко менять без отсоединения трубки от вакуум-аспиратора. Имея в своем арсенале широкий спектр специальных наконечников OP-Flex, персонал операционной может быстро и четко реагировать на непредвиденные ситуации, возникающие по ходу оперативного вмешательства.

Правильный выбор аспирационного наконечника и контроль уровня разрежения в системе снижают риск повреждения тканей, опасность развития инфекции и риск возникновения послеоперационных осложнений.

Эргономичная конструкция устройства позволяет хирургу работать с комфортом, держа рукоятку в любом положении без риска перегибания трубки.



OP-Flex предлагается с шестью видами наконечников:

Традиционный Yankauer — для применения при операциях, сопровождающихся массивным кровотечением, и для обычной атравматичной интраоперационной аспирации.

Конический Yankauer — для применения при нейрохирургических, косметологических, сложных сосудистых операциях; в детской хирургии.

Конический Yankauer с четырьмя вспомогательными отверстиями — для применения в детской хирургии или при проведении сложных сосудистых операций.

Собирающий Yankauer — для применения в торако-абдоминальной хирургии для более мощной аспирации содержимого из операционной раны.

Плоский Yankauer — для аспирации между нервными и мышечными тканями.

Традиционный Yankauer с четырьмя вспомогательными отверстиями — для обычной атравматичной интраоперационной аспирации.

- Эргономичная рукоятка обеспечивает превосходную маневренность.
- Предлагается со встроенным вакуум-контролем.
- Быстрая смена рукоятки аспирационной системы.
- Гладкое соединение рукоятки с коннектором трубки обеспечивает дополнительные удобства в работе хирурга.
- Широкий выбор аспирационных наконечников с вакуум-контролем или без него.
- Улучшенная рукоятка Poole с углубленными атравматичными отверстиями снижает риск повреждения тканей.
- Универсальный коннектор присоединяется ко всем видам вакуум-аспираторов.



Аспирационные наконечники OP-Flex с атравматичными вспомогательными отверстиями специально разработаны для снижения риска повреждения тканей.

Специально разработанный неперегибающийся коннектор обеспечивает непрерывную аспирацию содержимого из операционного поля при работе практически под любым углом.

Встроенный вакуум-контроль на рукоятке Op-Flex позволяет хирургу производить аспирацию из операционного поля только по необходимости, что особенно важно при работе с нежными тканями, например, головного мозга, кишечника и др.



Специальный универсальный коннектор можно отрезать таким образом, чтобы присоединить его к любому устройству для вакуум-аспирации, имеющему диаметр входной трубки от 8 до 18 мм (для Super Flow – от 10 до 18 мм).

14-18 10-14 8-10



OP-Flex Poole Рентгено-контрастный Poole Super Flow Изогнутый Super Flow








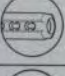


Коннектор OP-Flex обеспечивает быстрое и надежное соединение с любым типом устройств для вакуум-аспирации, что избавляет от необходимости держать в операционной различные виды переходников или адаптеров.



Наконечник Super Flow

Спецификации материалов

Рукоятки:	Бутадиен стирол
Super Flow	Бутадиен акрилонитрил стирол
Наконечники:	Поливинилхлорид
Poole	Бутадиен стирол
Super Flow	Акрилонитрил стирол
Poole:	Полипропилен
Трубки:	Поливинилхлорид
Коннекторы:	Поливинилхлорид

	Длина рукоятки (мм)	Размер рукоятки (CHFG)	Число вспомогательных отверстий	Вакуум-контроль	Диаметр соединительной трубки (мм)	Размер (CHFG) соединительной трубки Жесткость по Шору А74	Артикул	
 OP-Flex Традиционный Yankauer (открытый наконечник, изогнутый)	155	20	M	0	2100	24	3410218	
	155	20	M	0	3500	24	3410318	
	155	20	M	0			3305118	
	155	20	M	0	2100	24	3410018	
	155	20	M	0	x	3500	24	3410118
	155	20	M	0	x			3305018
	155	22	L	0		2100	24	3409818
	155	22	L	0		3500	24	3409918
	155	22	L	0				3304918
	155	22	L	0	x	2100	24	3409618
	155	22	L	0	x	3500	24	3409718
	155	22	L	0	x			3304818
	155	20	M	4		2100	24	3409218
	155	20	M	4		3500	24	3409418
	155	20	M	4				3304718
	155	20	M	4	x	2100	24	3408918
	155	20	M	4	x	3500	24	3409118
155	20	M	4	x			3304618	
 OP-Flex Собирающий Yankauer (диффузорный наконечник, изогнутый)	155	20	M	0	2100	24	3408218	
	155	20	M	0	3500	24	3408318	
	155	20	M	0			3304318	
	155	20	M	0	x	2100	24	3407918
	155	20	M	0	x	3500	24	3408118
	155	20	M	0	x			3304218
 OP-Flex Плоский Yankauer (открытый наконечник, изогнутый)	155	20	M	0	2100	24	3408718	
	155	20	M	0	3500	24	3408818	
	155	20	M	0			3304518	
	155	20	M	0	x	2100	24	3408418
	155	20	M	0	x	3500	24	3408618
	155	20	M	0	x			3404418
 OP-Flex Конический Yankauer (изогнутый)	155	12	S	0	2100	24	3407718	
	155	12	S	0	3500	24	3407818	
	155	12	S	0			3304118	
	155	12	S	0	x	2100	24	3407418
	155	12	S	0	x	3500	24	3407618
	155	12	S	0	x			3303818
	155	12	S	0	x	2100	24	3406318
	155	12	S	0	x	3500	24	3406518
	155	12	S	0	x			3303218
Соединительная трубка OP-Flex					2100	24	1610018	
OP-Flex					3500	24	1610218	
 OP-Flex Стандартный Pooler	175	20	M	2	2100	24	3407218	
	175	20	M	2	3500	24	3407318	
	175	20	M	2			3303618	
 OP-Flex Рентгеноконтрастный Pooler	175	20	M	2	2100	24	3407018	
	175	20	M	2	3500	24	3407118	
	175	20	M	2			3303518	
 OP-Flex Super Flow (открытый наконечник, изогнутый)	180	30	XL	2	2100	24	3405818	
	180	30	XL	2	3500	24	3405918	
	180	30	XL	2			3303018	
	180	30	XL	2	x	2100	24	3406018
	180	30	XL	2	x	3500	24	3406218
	180	30	XL	2	x			3403118
 OP-Flex Super Flow (открытый наконечник, прямой)	180	30	XL	2	2100	24	3405418	
	180	30	XL	2	3500	24	3405518	
	180	30	XL	2			3302818	
	180	30	XL	2	x	2100	24	3405618
	180	30	XL	2	x	3500	24	3405718
	180	30	XL	2	x			3302918



Медицинские расходные материалы от лучших производителей.

тел.: (812)718-4583
факс:(812)718-4582

195248, Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, 37, офис 913
E-mail: accent@mail.wplus.net

ЗАО "Уномедикал"

Россия, 101000, Москва,
Б. Златоустинский пер., 1, стр. 1
Тел.: (095) 748 7884
Факс: (095) 748 7894
www.unomedical.com

ИООО "Уномедикал"

Республика Беларусь,
222750, Минская обл.,
Дзержинский р-н,
г. Фаниполь, Заводская ул., 50
Тел.: + (017) 210 0940
Факс: + (017) 210,0059